




一次性使用输尿管内窥镜导管

XFGC-FU系列

镜体亲水涂层超滑设计



ZebraScope®一次性使用输尿管内窥镜导管

超滑亲水涂层，让您体验一镜到底的顺滑操作

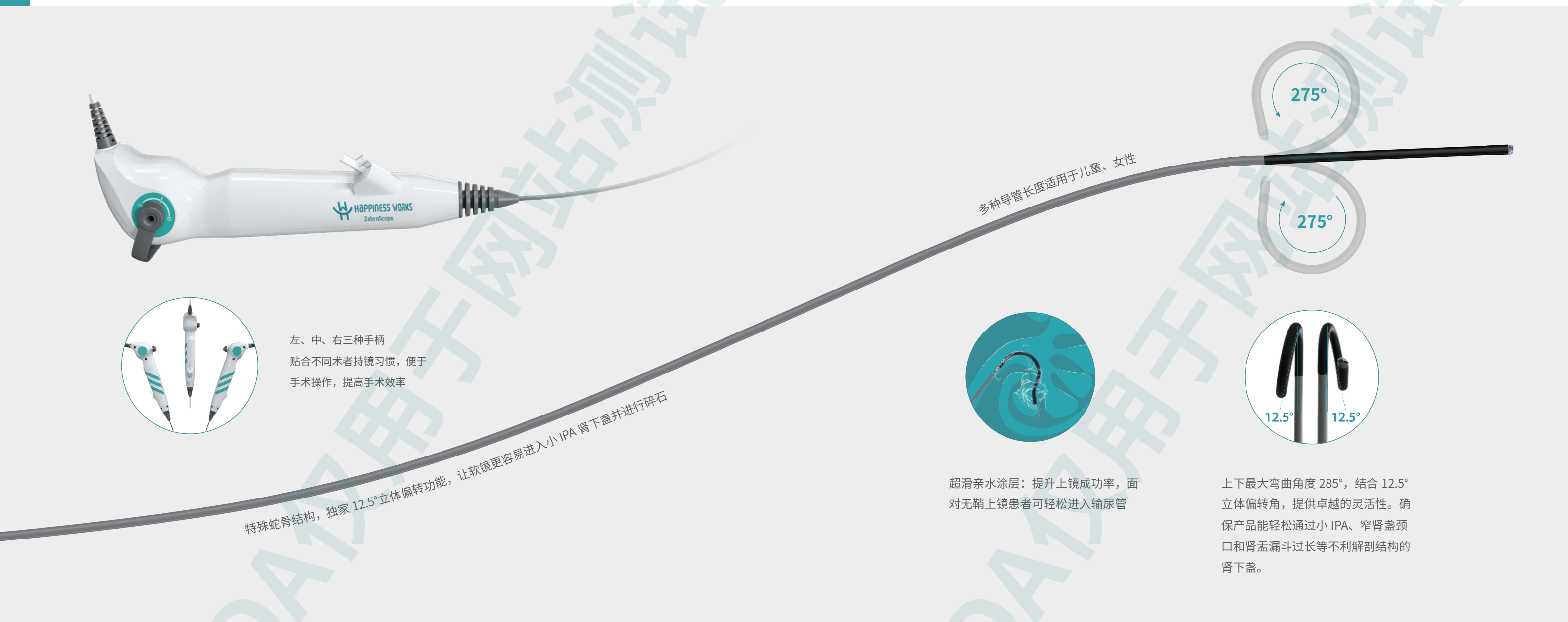

输尿管鞘推进技术：

超滑的亲水涂层，有助于输尿管鞘更容易通过镜体弯曲部，实现最大弯曲效果，这对于肾下盏结石的治疗至关重要。

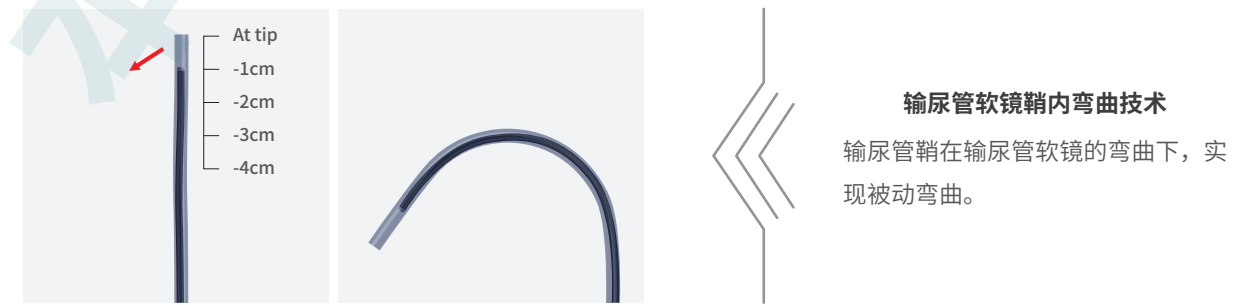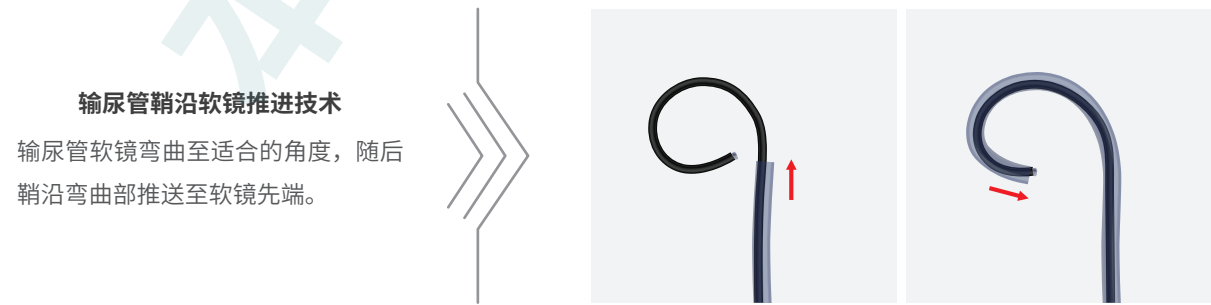

产品参数




在医疗机构中使用，与本公司电子内窥镜图像处理器配合使用，用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中的成像。不能与高频附件配用。

基本尺寸	插入部外径	8.6Fr
	工作通道内径	3.6Fr
光学性能	视向角	0° (直视)
	视场角	100°
	观察景深	2mm—50mm
	像素	16万像素
	摄像模块	CMOS
	照明光源	LED
弯曲度	上弯曲度	275°
	下弯曲度	275°
型号/规格 (RC/MC/LC)	XFGC-FU-380	工作长度380mm
	XFGC-FU-540	工作长度540mm
	XFGC-FU-640	工作长度640mm
	XFGC-FU-650	工作长度650mm
	XFGC-FU-660	工作长度660mm
	XFGC-FU-670	工作长度670mm

更多信息

ZebraScope®8.6 Fr 一次性使用输尿管内窥镜导管有两个版本：一个种是标准弯曲，通常在美国使用；另一种是反向弯曲，通常在欧盟使用。

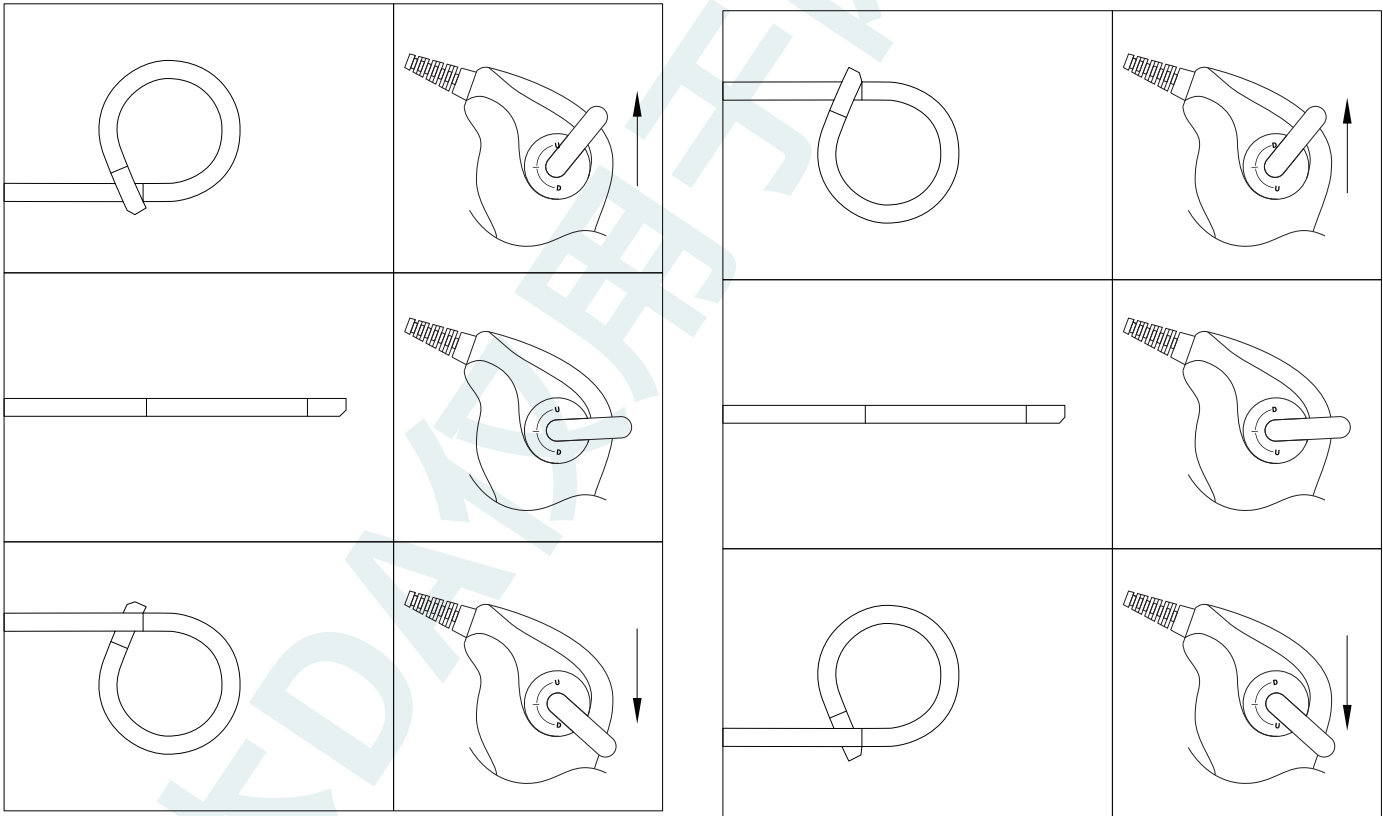

标准弯曲版：控制杆向下移动，软镜先端向下弯曲（向后）。
控制杆向上移动，则软镜先端向上弯曲（向前）

反向弯曲版：控制杆向下移动，软镜先端向上弯曲（向前）。
控制杆向上移动，则软镜先端向下弯曲（向后）。



安徽省幸福工场医疗设备有限公司
地址：安徽省蚌埠市蚌山区姜桥路 1300 号智慧产业园 2 栋
网址：www.hwmeds.com